



inFace BF-06E

**Használati
utasítás**

Szívesen használhatja az inFace

Az inFace 5 az 1-ben arcszépítő készüléket a Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., amely a Shenzhen Migoosmart Co., Ltd. leányvállalata, önállóan fejlesztette ki és gyártja. A firm alapítása óta a praktikum, a funkcionalitás és a biztonság alapkonceptiói alapján tervezték, arra törekedve, hogy technológiával és intellektussal rendelkező termékeket hozzon létre, és arra törekedve, hogy felfedezzen és újítson.

A termék jellemzői

Mélytisztítás | Import és export | Lifting és feszesítés | Ráncok kisimítása | A bőr megnyugtatása

Óvintézkedések

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket a használati utasításokat, és őrizze meg azokat későbbi használatra.

- Kérjük, a hibás működés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a termékhez mellékelt inFace töltőkábelt használja.
- Kérjük, használja ezt a terméket óvatosan, ha terhes vagy szoptat.
- Nem alkalmas olyan személyek számára, akik arcpasztikai műtéten estek át, vagy akiknek bőr alatti fémmimplantátumaik vannak.
- Nem szabad használni, ha az ápolás helyén bármilyen bőrbetegsége van, például fekély, gyűrűsféreg, kiütések stb.
- Nem alkalmas olyan személyek számára, akiknek súlyos leégés és heg túlbujánzás van a bőrápolás területén.
- Nem szabad használni, ha elektronikus eszközök, például hallókészülékek, pacemakerek vagy belső defiberek vannak a szervezetében.
- Hormonterápiát, bőrterápiát alkalmazó vagy immunszuppresszív gyógyszereket szedő személyek nem használhatják.
- Bármilyen sebészeti beavatkozás után, a termék használata előtt konzultáljon orvosával.
- Ezt a terméket az arcra és a nyakra kell használni. Nem használható sebekben, plasztikai sebészeti területeken, nyirokterületen, a száj belsejében, szemhéjakon, szemgolyókon és a szem körül (kivéve RF üzemmódban).
- A termék használatakor megfelelő bőrpoló termékeket kell választani (kivéve a hűtési módot), és nem szabad bőrpoló termékek nélkül használni.
- Ez a termék fűtési funkcióval rendelkezik. Ha a fűtési funkcióval működő üzemmódot használja, ne maradjon ugyanazon a területen 3 másodpercnél tovább, hogy elkerülje a bőrkárosodást.
- Kérjük, a terméket hűvös és száraz helyen helyezze el. Ne tegye nedves, párás helyre, például fürdőszobába, hogy elkerülje a meghibásodásokat, például a rövidzárlatot.
- Ezt a terméket nem lehet kimosni vagy vízbe meríteni. Használat után törölje le a termék fejét nedves zsebkendővel vagy ruhával. Tilos a terméket szerves oldószerekkel, például benzinnel és higítóval tisztítani.
- Ne üsse vagy ejtse le erősen ezt a terméket.
- Ne tárolja vagy használja a terméket erős mágneses mezőkkel és elektromos hullámokkal terhelt területeken.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják ezt a terméket, tartsa távol tőlük.
- Ne szerelje szét vagy javítsa meg a terméket saját maga, forduljon a termék szállítójához.

Termék paraméterek

Termék neve: inFace 5 az 1-ben

Modell: BF-06E

Termék mérete: 170.8 x 47.9 x 42.4mm

Nettó súly: Kb. 170g

Akkumulátor kapacitás: 1500mAh

Teljesítményszint: 3 szint

Bemeneti feszültség: 5V

Bemeneti teljesítmény: 6W

Névleges feszültség: 3.7V

Névleges teljesítmény: 6.6W

Töltési idő: kb. 2 óra

Működési idő: kb. 50 perc

Termékinformáció


A csomag tartalma:

1- az inFace 5 az 1-ben BF-06E *1

2- Mágneses töltőkábel *1

3- Pamutpálcika rögzítőgyűrű *1

4- Felhasználói kézikönyv *1

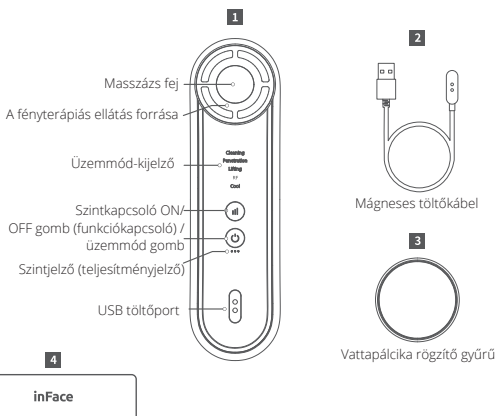

Figyelem: Az ebben a kézikönyvben bemutatott termékek és a vonatkozó funkciók leírásai, valamint egyes főnevek magyarázatai csak a termék értékelésének segédeszközeként használhatók, a felhasználóknak a tényleges tárgyra kell alapozniuk véleményüket. Az inFace termékek folyamatos fejlesztésének következetes politikája miatt fenntartjuk a jogot a termékleírások előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Használati utasítás

Kérjük, a termék használata előtt tisztítsa meg a bőrfelületet.


Tisztítási mód

Az egyedülálló intermittáló rezgés és fűtés funkció gyorsan megnyitja a pórusokat. A pozitív ionok segítenek eltávolítani a mély szennyeződések és javítani a nem megfelelő tisztítás okozta különböző bőrproblémákat. Mosás közben piros fény világít. A terméket nem szabad túl erősen a bőrhöz nyomni.

1. Tisztítsa meg tonerrel: Csatlakoztassa a tamponokat a masszázsfej a rögzítőgyűrűvel és nedvesítse meg tonikkal, majd vigye fel a tonikot az arcba akörkörös mozdulatokkal.

* Használat gyakorisága: Heti 2-3 alkalommal, érzékeny bőr esetén a használat gyakorisága ennek megfelelően csökkenthető.

* Alkalmazási idő: legfeljebb 3 perc egyszerre, érzékeny bőr esetén 1-2 perc egyszerre.

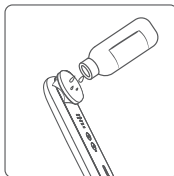

Párásító üzemmód

A nagyfrekvenciás rezgések és a melegítő funkció segít megnyitni a bőr pórusait. A negatív ionok segítenek a bőrápoló termékeknek és a maszk tápanyagainak mélyen behatolni az arcba. A trbu használatakor a narancssárga LED világít. A hidratálással fiatalító, ragyogó hatást érhetünk el, és javíthatjuk a bőr fakóságát és érdességét.

1. Használja tonikkal, testápolóval, krémmel vagy illóolajjal: Vigyen fel tonikot, testápolót, krémet vagy olajat az arcra és a nyakra. Mozgassa a masszírozó fejet alulról felfelé az arc és a nyak körvonalai mentén. A módszer alkalmazásakor kerülje a nyirokrendszeri területet.



2. Használja arcmaszkkal: Vigye fel az arcmaszkot az arcra, és húzza a masszírozó fejet alulról felfelé az arc kontúrja mentén. A módszer alkalmazásakor kerülje a nyirokrendszeri területet.

* Használat gyakorisága: naponta egyszer reggel és este alkalmazza, érzékeny bőr esetén az alkalmazás gyakorisága ennek megfelelően csökkenthető.

* Használati idő: egyszerre legfeljebb 3 percig tonikkal, testápolóval, krémmel vagy illóolajjal, és a használatot akkor fejezze be, amikor teljesen felszívódott. A készüléket ne mozgassa bőrápoló termék nélkül; legfeljebb 6 percig egyszerre, arcmaszkkal.

Emelési mód

A mikroáram és a vörös fény elősegíti a kollagén regenerálódását és megemeli az arckontúrokat.

1. Használja esszenciával, testápolóval, illóolajjal vagy géllal: Miután a bőrápoló terméket felhordta az arcra, használja a masszázsféjet alulról felfelé haladva az arc kontúrja mentén.

* Az alkalmazás gyakorisága: Heti 2-3 alkalommal, érzékeny bőr esetén az alkalmazás gyakorisága ennek megfelelően csökkenthető.

* Alkalmazási idő: egyszerre legfeljebb 3 percig, érzékeny bőr esetén 1-2 percig egyszerre, Miután a bőrápoló termék felszívódott, pótolható, ne használja bőrápoló termék nélkül.



RF üzemmód

A célzott rádiófrekvenciás (RF) funkció segíti a bőrápolási termékek jobb felszívódását, megakadályozza a szem alatti zsírrészecskék kialakulását, valamint javítja a szemek és a finom arcvonalak megjelenését.

1. szint - Alkalmazás szemránckrémmel: Vigye fel a szemránckrémet a következőkre szemkörnyék. Használja a masszázsféjet körkörös nyomásra vagy masszázusra. mozgások a szemkörnyék körül.



2. szint - Bőrápolási termékekkel vagy gélekkel való használat a homlokokon való használatához: Vigyen fel bőrápoló termékeket a homlokra. és használja a masszázsféjet. Miközben masszírozza a homlokát, mozgassa a fejét a készüléket úgy, hogy a mozdulatai egy "W" alakot utánozzanak.



3. szint - Használja bőrápolási termékekkel vagy gélekkel az arcokra és az orr- és szemhéjránckokra: Vigyen fel bőrápolási termékeket az arcokra és az orr- és szemhéjránckokra, majd használja a masszázsféjet körkörös mozdulatokkal az arcon.



* Az alkalmazás gyakorisága: Heti 3-4 alkalommal, érzékeny bőr esetén az alkalmazás gyakorisága csökkenthető.

* A használat időtartama: Az egyszeri használat ideje nem haladhatja meg a 3 percet egyszerre, ne használjon több szemránckrémeket vagy bőrápoló terméket a felszívódás után, ne használja a készüléket bőrápoló termék nélkül.

Hűtés üzemmód

A hűsítő üzemmód felgyorsíthatja a pórusok zsugorodását, valamint nedvességet és tápanyagokat zárhat a bőrbe. A kék fény segít megnyugtatón a bőrt és csillapítani a pattanásos gyulladást. Használatához nem szükséges bőrápoló termék.

1. Helyezze a masszázsféjet az arc közelébe, és használja tühegyes nyomással.

* Használat gyakorisága: minden kezelés után alkalmazza.

* Használat időtartama: egyszerre legfeljebb 3 perc.

A készülék működése

1. Tartsa lenyomva a "ON / OFF (funkciókapcsoló)" gombot 1,5 másodpercig. 1,5 másodpercre bekapcsolja/kikapcsolja a készüléket.

2. Az üzemmódváltáshoz nyomja meg röviden a "ON / OFF (funkciókapcsoló)" gombot. (Takarítás - hidratálás - emelés - RF - hűtés)

3. A szintváltáshoz nyomja meg röviden a szintgombot. (alacsony - közepes - magas)

4. A készülék működési ideje minden üzemmódban 3 perc. 3 perc elteltével a termék készenléti üzemmódba kerül. Az "ON / OFF (funkciókapcsoló)" gomb rövid megnyomásával a készüléket a következő üzemmódba kapcsolja a működés megkezdéséhez. Ha 1 percig nem végez semmilyen tevékenységet, a készülék három hangjelzés után automatikusan kikapcsol. (Hűtési üzemmódban a termék automatikusan kikapcsol, és 3 perc működés után három hangjelzést ad le.)

Tanácsadás

- Használat közben tartsa a fém érzékelőcsíkot a termék hátulján. Amikor a masszázsféj a bőrhöz ér, az emberi testtel egy áramkör jön létre.


- Ha a készüléket egy másik személy arcán használják, akkor annak érintkeznie kell a felhasználó testével, hogy áramkör alakuljon ki a termék és a felhasználó között, különben a termék nem tud normálisan működni.

- A tisztítási mód tonerrel használható. A termék feje vízálló, de a test nem. Kérjük, ne öblítse le közvetlenül a testet, és ne tegye vízbe.


- A hűtési üzemmód használata után a termék magától elvezeti a hőt. Normális, hogy a termékfej felmelegszik. Ha továbbra is használni kívánja a hűtési üzemmódot, a túlmelegedés elkerülése érdekében legalább 30 percre kapcsolja ki a készüléket.

Töltési utasítások


Amikor a termék akkumulátora majdnem lemerült, öt hangjelzést hall, és az akkumulátor kijelzője villogni kezd. A hangjelzés végén a termék automatikusan kikapcsol. Kérjük, töltsse fel a terméket, mielőtt újra használná.

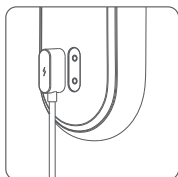

Töltéskor a mágneses töltőkábelt igazítsa a készülék elején lévő mágneses tapadókoronghoz, és győződjön meg arról, hogy az egész készülék száraz.

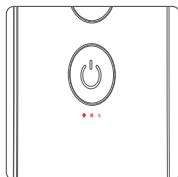

Töltés közben a töltöttségi szintjelző felváltva villog.

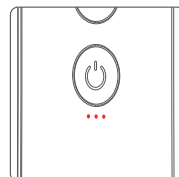

Teljesen feltöltött állapotban a töltöttségi szintjelző teljesen kigyullad. A töltőkábel leválasztása után a készüléket normál módon használhatja.

Kérdések és válaszok

Ha a készülék használata közben probléma merül fel, kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot. Ha nem tudja megoldani a problémát egyedül, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

K: A masszázsfaj nem rezeg.

V: Ellenőrizze, hogy a masszázsfaj védőfóliáját és a test hátoldalán lévő fémcsík védőfóliáját eltávolították-e. Használat előtt távolítsa el a védőfóliát; használat közben az ujjaknak meg kell fogniuk a készülék hátoldalán lévő fém érzékelőcsíkot, hogy a masszázsfaj érintkezzen a bőrrel és áramkört képezzen az emberi testtel.

K: A masszázsfaj nem rezeg, amikor egy másik személy arcán használják.

V: Ha egy másik személy arcán használják, akkor érintkeznie kell a felhasználó testével, hogy hurkot képezzen, különben a termék nem fog megfelelően működni.

K: Hogyan tisztítsam meg használat után?

V: Kérjük, használat után törölje le a termék fejét nedves zsebkendővel vagy ruhával.

K: Nincs válasz töltés közben.

V: Az alábbi lépéseket követve megtalálhatja a problémát:

1) Töltés közben ellenőrizze, hogy a tápkijelző villog-e;

2) Ellenőrizze, hogy a töltőkábel és a dugó helyesen van-e behelyezve;

3) Ellenőrizze, hogy a töltőkábel nem sérült-e meg.

K: Mennyi ideig tart a töltés?

V: A termék töltési ideje körülbelül 2 óra. A terméket töltés közben nem lehet használni.

K: A termék automatikusan kikapcsol.

V: A termék minden üzemmódba 3 percig tart. 3 perc elteltével a termék készenléti üzemmódba kerül. Ha 60 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, a termék automatikusan kikapcsol. Ha folytatni kívánja a munkát, tartsa lenyomva az "ON /OFF (funkciókapcsoló) / üzemmód gombot 1,5 másodpercig a termék bekapcsolásához.

Védelem és értékesítés utáni szolgáltatás

1. Az inFace egy év garanciát vállal a termékek standard szolgáltatására. A jótállási időszak a vásárlás időpontjától kezdődik.

2. A jótállási időszak alatt az anyag- vagy gyártási hiba miatt bekövetkező termékhiba esetén szükség szerint kicseréljük az alkatrészeket vagy a teljes terméket.

3. A garancia igénybevételehez a terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát), amely igazolja a vásárlás dátumát, be kell nyújtani a kereskedőnek.

4. A garancia nem terjed ki a következő feltételekre:

A. Nem megfelelő használatból eredő károk, például: nem megfelelő tápegység használata, a termék nem megfelelő aljzatba történő csatlakoztatása, ember okozta károk stb.

B. A termék normál használatából eredő kopás és elhasználódás.

C. A termék más célú használata, nem megfelelő üzemeltetése vagy szakszerűtlen karbantartása, valamint a nem a mi firmánkhoz tartozó tartozékok használata, amelyek a termékkel kapcsolatos problémákat eredményeznek.

D. Fogyóeszközök, tartozékok stb.

E. Vis maior (például villámcsapás, földrengés, árvíz stb.) által okozott károk.

Környezetvédelem

1. Ez a termék, a csomagolás és a tartozékok újrahasznosítható anyagokból készültek.

2. A hulladékok különböző újrahasznosítási szintekre történő felosztása a hasznos anyagok újrahasznosításának megkönnyítése érdekében.

Hulladékártalmatlanítás

A termék címkéjén, a használati utasításban vagy a csomagoláson található felirat jelzi, hogy a terméket nem szabad összeférhetetlen módon ártalmatlanítani.

Forduljon a helyi hatóságokhoz a hulladékosztályozás szerinti újrahasznosítással kapcsolatban. Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt ártalmatlanítják.

Az akkumulátor eltávolításakor kapcsolja ki a készülék áramellátását. Az

akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni.



inFace

Product Name: inFace 5 in 1
Facial Beauty Device
Product Model: BF-06E
Production Date: _____
Quality Inspection: _____



Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.

Tel: 0086-400-007-8388

WeChat szolgáltatási fiók: migoosmart

Irodai órák: 9:00-18:00 hétfőtől szombatig

(kínai időszámítás, ünnepnapokon és hétvégén szabadnap)

Firm információ: Shenzhen Migoosmart Co, Ltd.

Cím: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intelligent Manufacturing Industrial Park,

Gushu Community, Xixiang Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Kína

E-mail: service@migoosmart.com

Irányítószám: 518000

Oficial weboldal: www.migoosmart.com

* A végző értelmezés joga a Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.-t illeti meg.



Oficial weboldal



WeChat
szolgáltatási
fiók

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.

CE A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnak törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma: |
| Hibajelenség: | Jótállás új határideje: |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám: |
| (Ph) | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma: |
| Hibajelenség: | Jótállás új határideje: |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám: |
| (Ph) | Elvégzett javítás/csere: |
| Bejelentés dátuma: | Visszaadás dátuma: |
| Hibajelenség: | Jótállás új határideje: |
| Új azonosító szám: | Munkalapszám: |
| (Ph) | Elvégzett javítás/csere: |

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása